
# URGO ALGOPLAQUE FILM 10x10

SKU : SOI03.00064

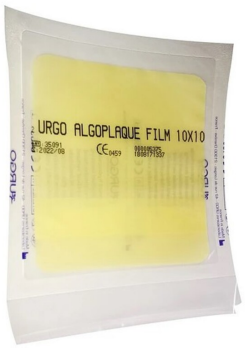


Algoplaque est composé d'une couche extra-fine de particules hydrocolloïdes (carboxyméthylcellulose) incluse dans une matrice élastomère adhésive et d'un support transparent et semi-perméable en polyuréthane.

## Description

### URGO ALGOPLAQUE FILM 10x10 : Un Pansement Hydrocolloïde Transparent Pour Une Cicatrisation Optimale

**URGO ALGOPLAQUE FILM 10x10** est un **pansement hydrocolloïde adhésif et imperméable**, conçu pour **favoriser la cicatrisation des plaies superficielles** tout en permettant une **surveillance visuelle de l'évolution de la plaie**. Grâce à sa **technologie avancée**, il assure un **milieu de cicatrisation humide**, essentiel pour une **réparation cutanée rapide et efficace**.

## Une Technologie Hydrocolloïde Pour Une Protection Renforcée

Ce pansement agit en **absorbant les exsudats** et en **formant un gel protecteur** au contact de la plaie. Ce gel maintient une **hydratation idéale**, protège les **tissus nouvellement formés** et **favorise une cicatrisation rapide et sans douleur**. Son **support transparent et semi-perméable** permet de **surveiller l'évolution de la plaie sans retirer le pansement**, réduisant ainsi les manipulations et les risques d'infection.

## Les Avantages de URGO ALGOPLAQUE FILM 10x10 Pour Une Cicatrisation Optimale

- **Cicatrisation en milieu humide** : Stimule la régénération cellulaire pour une réparation rapide.
- **Protection renforcée** : Forme une barrière contre les bactéries et les contaminants.
- **Retrait atraumatique** : Minimise la douleur et préserve les tissus néoformés.
- **Ultra-souple et flexible** : S'adapte facilement aux zones anatomiques complexes.
- **Absorption optimale** : Gère efficacement les exsudats pour éviter la macération.
- **Transparence** : Permet de surveiller l'évolution de la plaie sans retirer le pansement.

## Conseils d'Utilisation

Avant application, **nettoyez la plaie** avec une **solution saline ou antiseptique adaptée**, puis **séchez délicatement**. Placez **URGO ALGOPLAQUE FILM 10x10** directement sur la plaie, en veillant à un **contact parfait**. **Fixez avec une bande adhésive ou un pansement secondaire** si nécessaire. **Renouvelez le pansement tous les 4 à 6 jours**, ou dès saturation par les exsudats.

## Pourquoi Choisir URGO ALGOPLAQUE FILM 10x10 ?

Grâce à sa **technologie avancée**, **ce pansement** est une **solution incontournable** pour les soins nécessitant une **cicatrisation rapide et efficace**. Son **action protectrice et hydratante** garantit une **prise en charge optimale des plaies**, tout en offrant un **confort maximal aux patients**.

## Une Référence Médicale Pour Les Soins Des Plaies Superficielles

Utilisé dans les **hôpitaux, cliniques et soins à domicile**, **URGO ALGOPLAQUE FILM 10x10** constitue une **solution essentielle** pour garantir une **prise en charge optimale des plaies**, assurant ainsi une **cicatrisation rapide et efficace**.